

FØRSTE HJÆLP



SKAB TRYGHED PÅ
ARBEJDSPLADSEN

Øjenskyl
Plaster
Førstehjælpsstationer

plum

Optimer sikkerheden. Sæt førstehjælpen i system

Med Plums koncepter inden for førstehjælp begrænser du ulykkers omfang og konsekvenser til glæde for medarbejdere og virksomhed



Hver dag sker der små og store uheld. Derfor er det vigtigt altid at have førstehjælp ved hånden – der, hvor uheldet rammer.

Vi tilbyder dig og dine kollegaer et bredt udvalg af førstehjælpsprodukter, så du hurtigt, sikkert og hygiejnisk kan behandle rifter og mindre sår samt skader på øjnene. Samtidig har vi udviklet både førstehjælpsstationer og mobile løsninger, som skaber overblik og sikrer, at førstehjælpen altid er lige ved hånden.

SKRÆDDERSYET LØSNING TIL HURTIG OG EFFEKTIV HJÆLP

Førstehjælpsprodukterne består af et bredt sortiment af øjenskylløsninger, plastre, sårrenseservietter m.m. Du kan sammensætte produkterne, præcis som du vil. Derfor har vi løsninger til dig, uanset om du arbejder på et kontor eller håndterer syrer/baser i et højrisiko-miljø med fx opladning af kraftige batterier, industriel rengøring, i et laboratorium eller i den petrokemiske industri.



MISTEDE DET MESTE AF SYNET, DA SLANGEN RØG AF.

Hanstholm Fiskemølsfabrik har et avanceret produktionsanlæg, men havde for få år siden kun almindelig øjenskyll på stedet. Det kostede en smed en stor del af synet, da en slange sprang af, og smeden fik lud i begge øjne. Ulykken fik virksomheden til at opgradere sin førstehjælpsløsning:

- Havde vi haft pH Neutral DUO, ville ulykken have fået et andet udfald. Det har vi nu - udtaler Ronni Jørgensen, indkøbsansvarlig.



Den grønne Plum Øjenskyll hjælper dig med at bortskylle snavs og fremmedlegemer

Den blå pH Neutral yder øjeblikkelig førstehjælp ved alvorlige uheld med syrer og baser

Bløde flasker, der er lette at håndtere og skylle med i en blid stråle

Kom ikke i tvivl om brugen. Tydelige piktogrammer instruerer dig i brugen af produktet

Den ergonomiske øjenkop af blød plast er formet efter øjets runding. Pres den sammen, inden du sætter den for øjet. Så hjælper koppen med at holde øjet åbent og giver en optimal væskestrøm samt skylletid



Hurtig og nem at åbne. Et enkelt vrid bryder forseglingen – og du er klar til at skylle



Lang holdbarhed på 3 år sikrer en god økonomi. Udløbsdato står tydeligt på fronten af etiketten

Med den ergonomiske DUO øjenkop skyller du begge øjne på én gang. Koppen hjælper med at holde øjnene åbne og giver en optimal væskestrøm samt skylletid

Vi dækker hele spektret

Den grønne Plum Øjenskyll klarer snavs. Den blå pH Neutral er altafgørende ved uheld med syrer og baser

DU HAR KUN TO ØJNE. PAS PÅ DEM

Synet er en af dine vigtigste sanser. Så pas på dine øjne. Uanset hvor omhyggelig du er, kan ingen gardere sig mod uheld – men alle kan sørge for at være beredt. Med vores øjenskyll-løsninger ved hånden har du gjort, hvad du kan.

Er uheldet ude, kan få sekunder være forskellen på, om dit syn tager skade eller ej. Derfor er hurtig adgang til øjenskyllning helt nødvendig ved alle arbejdspladser, hvor der er risiko for øjenulykker.

UNIKKE SKYLLELØSNINGER I ET BREDT PROGRAM

Vores brede produktprogram sikrer dig en optimal løsning til netop dit behov. Du kan vælge små og store stationer til vægmontering direkte ved arbejdsstedet. Eller små mobile løsninger til at have med i varebilen, i værktøjs- og førstehjælpskassen og på rengøringsvognen i den specielle bæltetaske.

Flaskerne er CE-mærkede i henhold til reglerne for medicinsk udstyr



Sådan forebygger du øjensskader

Plum Øjenskyl skyller fremmedlegemer som støv og snavs væk fra øjet, mens pH Neutral neutraliserer syrer og baser i øjet

Vi har i udviklingen af vores koncepter haft et tæt samarbejde med dygtige øjnlæger. Det betyder, at produkterne er gennemtænkte ned til mindste detalje. De er lette at tage i brug. Tydelige piktogrammer vejleder dig i korrekt anvendelse. Øjenkappen hjælper med at holde øjet åbent. Skylløvæsken rammer øjet det rigtige sted og med rette mængde i bløde jævne stråler.



Plum Øjenskyl er let at bruge, hvis uheldet er ude



Drej øjenkappen i pilens retning til forseglingen brydes



Læg hovedet bagover, tryk let på flasken og skyl



Det er også muligt at skylle øjet, mens du står foroverbøjet - ved et let tryk på flasken

ØJENSKYLLEPLAN

1 Bestem arten af skadestof	2 Vælg rette øjenskyl og skyl	3 Fortsæt skylning med Plum Øjenskyl	4 Skyl som angivet
Fremmedlegemer Støv, snavs, metal og træsplinter m.v.	Plum Øjenskyl	Plum Øjenskyl	Skyl til fremmedlegemet er skyllet ud
Syrer	pH Neutral	Plum Øjenskyl	Skyl ca. 2 min. med pH Neutral og fortsæt skylning med Plum Øjenskyl frem til læge eller skadestue
Baser	pH Neutral	Plum Øjenskyl	Skyl ca. 2 minutter med pH Neutral og fortsæt skylning med Plum Øjenskyl frem til læge eller skadestue
Andre kemikalier (fx opløsningsmidler og olier)	Plum Øjenskyl	Plum Øjenskyl	Skyl til ubehaget forsvinder eller frem til læge eller skadestue

VIGTIGT! Øjenskylløvæsken skal altid ramme øjet i en blød, jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme den. Vi opfordrer dig til altid at søge læge ved alle typer af øjenulykker. Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så du kan fortsætte med at skylle under transport til læge eller skadestue. Denne vejledning kan rekvireres som særtryk hos Plum.



Indlysende og enestående

Plum Duo er en unik løsning på markedet. Med den behøver du ikke vælge, hvilket øje du vil redde

CA. 50 % AF ALLE ULYKKER RAMMER BEGGE ØJNE

Erfaringer viser, at ca. halvdelen af alle øjenulykker med kemikalier rammer begge øjne. Med vores DUO øjenkopper er du beredt. Du kan skylle begge øjne på én gang og slipper for at vælge, hvilket øje du vil redde.

ØJENKOPPEN HJÆLPER TIL OPTIMAL SKYLNING

Specielt ved syre/base-ulykker er tiden en afgørende faktor. Skadevirkningen afhænger naturligvis af syres eller basens styrke, men derudover er kontakttiden med øjet afgørende. En optimal førstehjælp skal derfor neutralisere skadestoffet så hurtigt som muligt. Med den unikke DUO-kop behandler du yderligere begge øjne på én gang. Udformningen af øjenkoppen hjælper dig med at holde øjnene åbne under skylningen og sikrer en korrekt væskestrøm og skylletid.

Plum Øjenskyll og pH Neutral er beregnet til engangsbrug for at sikre, at skyllevæsken er steril hver gang.



Øjensskyl ved fremmedlegemer

Plum Øjensskyl kan fjerne gener, når du får fremmedlegemer i øjet - og forebygge komplikationer efterfølgende

Du får let et fremmedlegeme i øjet. Støv fra luften eller snavs, rengøringsmidler eller maling fra dine hænder. Der er forhøjet risiko, når du arbejder med maskiner og værktøj, der kan give dig splinter af træ eller metal i øjet.

At få noget i øjet kan være særdeles ubehageligt, da øjet er ekstremt følsomt. Ubehandlet kan situationen udvikle sig til øjen-, hornhinde- eller regnbuehindebetændelse. Når du skaller straks efter at uheldet er sket, forebygger du dette og undgår, at fremmedlegemer sætter sig fast.

Plum Øjensskyl indeholder en steril saltvandsopløsning på 0,9 % natriumklorid, hvilket svarer til øjets naturlige væske. I brug skaller du øjet med en blød og behagelig stråle. Produktprogrammet rummer alt fra den lille handy flaske, du altid kan have med dig, til væghængte stationer, som gør hjælpen let at finde i en nødsituation.

**200 ML****PLUM ØJENSKYL**

En lille og handy flaske i lommeformat med 0,9 % steril natriumklorid. Flasken er let at have med sig i den specialdesignede bæltetaske, i førstehjælpskassen, i værktøjskassen og lignende. Leveres med støvhætte.

Skylletid: ca. 2 min.
Forpakningsstr: 10 x 200 ml
Varenr: 4691

**500 ML****PLUM ØJENSKYL**

En let håndterlig flaske med 0,9 % steril natriumklorid. Kan bruges løst eller som genopfyldning i øjenskyllestationer og -bokse. Leveres med støvhætte.

Skylletid: ca. 5 min.
Forpakningsstr: 12 x 500 ml
Varenr: 4604

**1000 ML****PLUM ØJENSKYL**

Flaske med 0,9 % steril natriumklorid. Indeholder 1000 ml øjenskyl, hvorved der opnås en længerevarende skylle-effekt. Flasken kan bruges løst eller som genopfyldning i øjenskyllestationer og -bokse. Leveres med støvhætte.

Skylletid: ca. 10 min.
Forpakningsstr: 6 x 1000 ml
Varenr: 4707

**500 ML****PLUM ØJENSKYL DUO**

En let håndterlig flaske med 0,9 % steril natriumklorid. Den ergonomiske DUO øjenkop gør det muligt at skylle begge øjne samtidigt. Flasken kan bruges løst eller som genopfyldning i DUO øjenskyllestationer og -bokse.

Skylletid: ca. 2 min.
Forpakningsstr: 6 x 500 ml
Varenr: 4861

**1000 ML****PLUM ØJENSKYL DUO**

Flaske med 0,9 % steril natriumklorid. Indeholder 1000 ml øjenskyl, hvorved der opnås en længerevarende skylleeffekt. Den ergonomiske DUO øjenkop gør det muligt at skylle begge øjne samtidig. Flasken kan bruges løst eller som genopfyldning i DUO øjenskyllestationer og -bokse.

Skylletid: ca. 5 min.
Forpakningsstr: 6 x 1000 ml
Varenr: 4800

**3 X 500 ML****PLUM ØJENSKYL**

Praktisk og handy sampak med 3 stk. Plum Øjenskyl flasker med 0,9 % steril natriumklorid. Æsken er nem at have med i bilen på vej til læge eller skadestue. Flaskerne kan også bruges enten løst eller som genopfyldning i øjenskyllestationer og -bokse.

Skylletid: ca. 15 min.
Forpakningsstr: 4 x 3 x 500 ml
Varenr: 4620

Øjenskyl ved kemiske uheld

pH Neutral neutraliserer
både syrer og baser.
Og skyller dem samtidigt
ud af øjet. Det giver
dokumenteret sikkerhed
og effekt!

VIGTIGT

Forbehold overfor Flussyre

Flussyre er en middelstærk syre, som også er giftig og kraftigt ætsende på hud og knogler. pH neutral og Plum øjenskyl kan neutralisere og bortskylle men ikke begrænse den ætsende effekt, og de kan derfor ikke anbefales til førstehjælp ved øjenulykker med Flussyre.

ANBEFALET BRUG AF PH NEUTRAL

pH Neutral er en 2 minutters øjenskylleløsning til ulykker med syrer og baser. Skyl med pH Neutral for at bringe skadestoffets pH-værdi til et uskadeligt niveau hurtigst muligt. Fortsæt derefter skylningen med Plum Øjenskyl 0,9 % natriumklorid frem til læge eller skadestue.

FARLIGE KEMIKALIER ER OVERALT

I en lang række jobs, virksomheder og brancher er du særligt udsat for alvorlige øjenskader på grund af kemikalier. I lufthavne, i kemiske fabrikker, i genbrugsindustrien, på cementfabrikker og byggepladser, i fødevare-, metal-, papir- og mineindustrien - eller i den petrokemiske industri. Overalt bruges stærke syrer og baser i produktion og ved rengøring. Risikoen for at noget går galt - fx ved at en slange springer af en studs eller et batteri eksploderer - er en del af dagligdagen. Her skal du have pH Neutral i dit beredskab.

FÅ SEKUNDER AFGØR ALT

Syrer og baser nedbryder hudens og slimhindernes struktur. Hvor alvorligt ættseskader udvikler sig, afhænger primært af:

- Kemikaliets koncentration – stærke syrer og baser er voldsomt ætsende.
- Temperaturen – en høj temperatur forstærker kemikaliets ætsende egenskaber.
- Kontakttiden – jo længere kontakttid des dybere trænger skadestoffet ind.

Ved øjenulykker med syrer og baser gælder det om hurtigst muligt at neutralisere kemikaliets til et pH-niveau omkring 7,4 svarende til øjenvæskens normale pH-niveau - helst før syren eller basen er trængt igennem hornhinden. For at optimere sikkerheden, hvor der er risiko for syre- og baseskader, skal øjenskylleløsningen være:


- Let tilgængelig
- Hurtig at betjene
- Effektiv

ØJENSKYLLEVÆSKEN SKAL VÆRE EFFEKTIV

pH Neutral er en 4,9 % fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer selv meget stærke syrer og baser. Væsken er opbygget af fosfatsalte, som i forvejen findes i kroppen. Bufferdelen hydrogenfosfat er effektiv mod syrer, mens bufferdelen dihydrogenfosfat reagerer imod basiske stoffer. Virkningen af pH Neutral er dokumenteret gennem videnskabelige studier.^{1) 2)}

Vi har testet neutraliseringseffekten af pH Neutral overfor både stærke syrer og baser sammenlignet med effekten af en almindelig øjenskyllevæske med 0,9 % natriumklorid. Testens resultat viser tydeligt, at pH Neutral hurtigt neutraliserer både syrer og baser til et uskadeligt pH-niveau. Almindelig øjenskyl fortynder væsken, men der opnås kun små ændringer i pH-værdien (Figur 1).

Figur 1: Neutralisering af stærk base og stærk syre

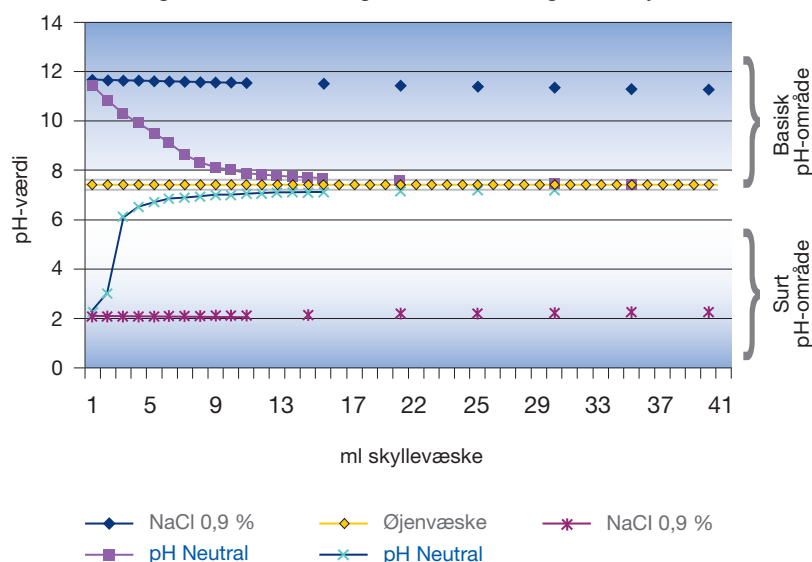

1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005. Yderligere dokumentation om pH Neutrals sikkerhed og effekt kan rekvireres



200 ML PH NEUTRAL

En lille og handy flaske i lommeformat med 4,9 % steril fosfatbuffer, der hurtigt neutraliserer syrer og baser. Flasken er let at have med sig i den specialdesignede bæltetaske, i førstehjælpskassen, i værktøjskassen og lignende. Kan også anvendes som genopfyldning i øjenskyllestationer og -bokse. Leveres med støvhætte.

Skylletid: ca. 2 min.
Forpackningsstr: 10 x 200 ml
Varenr: 4752



500 ML PH NEUTRAL DUO

En let håndterlig flaske med 4,9 % steril fosfatbuffer, der hurtigt neutraliserer syrer og baser. Flasken er udstyret med en DUO øjenkop, der gør det muligt at skylle begge øjne samtidig. Særligt velegnet på arbejdspladser med risiko for, at begge øjne rammes. Flasken kan bruges løst eller som genopfyldning i øjenskyllestationer og -bokse.

Skylletid: ca. 2 min.
Forpackningsstr: 6 x 500 ml
Varenr: 4801

” UHELD MED SYRER OG BASER SKER, NÅR DU MINDST VENTER DET

pH Neutral DUO reddede synet på en medarbejder hos SITA France. De håndterer affald som fx plastflasker med rengøringsmidler. Væsken fra en rengøringsflaske ramte begge øjne på medarbejderen. Takket være pH Neutral DUO blev skadestoffet neutraliseret, og medarbejderen var på arbejde allerede dagen efter.

Øjenskyllestationer til ulykker med fremmedlegemer

En væghængt løsning giver god oversigt og gør
hjælpen let at finde

VIS AT DU TAGER FØRSTEHJÆLP ALVORLIGT

Når først ulykken er sket, er det for sent at skulle lede efter hjælpen i en kasse eller under et skab.

LETTE AT MONTERE

Alle stationer er lette at montere og er udstyret med spejle og tydelige piktogrammer, der viser brugen.

Med de væghængte stationer sætter du førstehjælpen i system og gør den let at finde, når uheldet er ude. Vælg mellem åbne vægstationer og boksløsninger. De sidste kan især anvendes i støvede arbejdsmiljøer for at beskytte flaskerne og undgå at føje mere støv til et uheld.

Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så der i alvorlige tilfælde kan skylles på vej til videre behandling.



PLUM ØJENSKYLLESTATION DUO

Vægstation med 1000 ml Plum Øjenskyll DUO. Specielt velegnet til mindre samt mobile arbejdspladser, hvor en længerevarende skylning af begge øjne kan være påkrævet.



ØJENSKYLLESTATION 500 ML

Vægstation med 500 ml Plum Øjenskyll. Specielt velegnet til mindre og mobile arbejdspladser.



PLUM ØJENSKYLLESTATION MAXI

Vægstation med 2 stk. 1000 ml Plum Øjenskyll. Specielt velegnet til steder, hvor en længerevarende skylning kan være påkrævet. Leveres med støvhætte.

Skylletid: ca. 5 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4802
Mål: h: 375 x b: 180 x d: 95 mm

Skylletid: ca. 5 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4611
Mål: h: 300 x b: 170 x d: 80 mm

Skylletid: ca. 20 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4708
Mål: h: 375 x b: 260 x d: 95 mm



PLUM ØJENSKYLLEBOKS

Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 2 stk. 500 ml Plum Øjenskyll. Specielt velegnet til produktionsområder med meget støv og snavs samt til mobile arbejdspladser.

Skylletid: ca. 10 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4650
Mål: h: 280 x b: 230 x d: 110 mm

FÅS OGSÅ MED VARMEELEMENT
Varenr: 4649



PLUM ØJENSKYLLEBOKS DUO

Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 2 stk. 1000 ml Plum Øjenskyll. Specielt velegnet til mindre samt mobile arbejdspladser, hvor der er stor risiko for at få støv og snavs i begge øjne.

Skylletid: ca. 10 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4816
Mål: h: 357 x b: 252 x d: 116 mm



PLUM ØJENSKYLLESTATION

Vægstation med 2 stk. 500 ml Plum Øjenskyll. Specielt velegnet i ikke snavsede miljøer og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for at få fremmedlegemer i øjet.

Skylletid: ca. 10 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4694
Mål: h: 290 x b: 228 x d: 80 mm



Øjenskyllestationer til ulykker med syrer og baser

Med en kombiboks er du dækket ind – lige fra banale uheld til alvorlige ulykker med skader fra syrer eller baser

Pludselig springer et rør med væske under tryk – eller en slange hopper af en studs. Resultatet er, at stærkt ætsende væsker sprøjter ud. Sådan sker de hyppigste ulykker med kemiske væsker. Bliver du ramt af stænk i øjet, tæller sekunder, hvis synet skal reddes.

PLUM ØJENSKYL OG PH NEUTRAL ER ET STÆRKT MAKKERPAR

Ved ulykker med syrer og baser anbefaler vi en kombineret skylning med først pH Neutral og efterfølgende Plum Øjenskyll. Vi har derfor sammensat et udvalg af Combibokse, så du først kan neutralisere syren eller basen og dernæst fortsætte skylningen frem til læge eller skadestue.

Arbejder du med især flydende kemikalier, anbefaler vi pH Neutral DUO, så du i ulykkestilfælde straks kan skylle begge øjne.

Vi kan anbefale de åbne stationer til miljøer uden støv og snavs som fx laboratorier. De lukkede stationer beskytter produkterne i støvede miljøer. Alle stationer er lette at montere og er forsynet med spejl og tydelige piktogrammer, der viser, hvordan du bruger øjenskyll-flaskerne.



PLUM COMBIBOKS DUO

Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 500 ml pH Neutral DUO og 500 ml Plum Øjenskyll DUO. Specielt velegnet til støvede produktionsområder, hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser, samt hvor der er risiko for, at begge øjne rammes.

Skylletid: pH Neutral ca. 2 min.
pH Øjenskyll ca. 2 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4862
Mål: h: 280 x b: 230 x d: 110 mm



PLUM COMBIBOKS DUO MAXI

Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 500 ml pH Neutral DUO og 1000 ml Plum Øjenskyll DUO. Specielt velegnet til støvede produktionsområder, hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser, samt hvor der er risiko for, at begge øjne rammes.

Skylletid: pH Neutral ca. 2 min.
Plum Øjenskyll ca. 5 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4810
Mål: h: 357 x b: 252 x d: 116 mm



PLUM COMBIBOKS

Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 200 ml pH Neutral og 500 ml Plum Øjenskyl. Specielt velegnet til støvede produktionsområder, hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser.

Skylletid: pH Neutral ca. 2 min.
Plum Øjenskyl ca. 5 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4787
Mål: h: 280 x b: 230 x d: 110 mm

FÅS OGSÅ MED VARMEELEMENT

Varenr: 4664



PLUM COMBISTATION

Vægstation med 200 ml pH Neutral og 500 ml Plum Øjenskyl. Specielt velegnet til steder, hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser.

Skylletid: pH Neutral ca. 2 min.
Plum Øjenskyl ca. 5 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4773
Mål: h: 290 x b: 228 x d: 80 mm



PLUM COMBISTATION DUO

Vægstation med 500 ml pH Neutral DUO og 1000 ml Plum Øjenskyl DUO. Specielt velegnet til steder, hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser, samt hvor der er risiko for, at begge øjne rammes.

Skylletid: pH Neutral ca. 2 min.
Plum Øjenskyl ca. 5 min.
Forpackningsstr: 1 stk.
Varenr: 4803
Mål: h: 375 x b: 250 x d: 95 mm

QuickFix

QUICKFIX ER EN UNIK DISPENSER:

- Giver umiddelbar og synlig adgang til plaster og øjenskylleampuller
- Hvert plaster er klart til brug ved blot at trække det ud af dispenseren
- Alle plastre er pakket for sig
- Kan betjenes med én hånd
- Kan fyldes efter behov
- Det er tydeligt at se, når den er tom
- Nemt at standse mindre blødninger, også uden at plette på de øvrige plastre
- Små dimensioner – let at finde plads til QuickFix
- Rummer hylde til opbevaring af relevante småting
- Kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle - hvilket kan reducere utilsigtet svind



QUICKFIX ELASTIC

Væghængt plasterdispenser med 90 stk. elastiske og behagelige tekstilplastre, der tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og lader huden ånde.



QUICKFIX WATER RESISTANT

Væghængt plasterdispenser med 90 stk. vandfaste plastre, der især er velegnede til fugtige arbejdsmiljøer. Plastrene er produceret i et beskyttende PE-materiale, der lader huden ånde.



QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT

Væghængt plasterdispenser med 45 stk. elastiske og 45 stk. vandfaste plastre. En kombination af plastre, der dækker flere behov på arbejdspladsen.

Forpakningsstr: 1 stk.
Varenr: 5502
Refill varenr: 5512
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål: l: 72 x b: 25 mm

Forpakningsstr: 1 stk.
Varenr: 5501
Refill varenr: 5511
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål: l: 72 x b: 25 mm

Forpakningsstr: 1 stk.
Varenr: 5507
Refill varenr: 5512 & 5511
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål: l: 72 x b: 25 mm

QuickFix er hurtig hjælp til hverdagens små uheld

Hæng plasteret på væggen og spar tid.
På med plastret og tilbage til arbejdet!

HURTIG OG HYGIEJNISK HJÆLP TIL SMÅ SKADER

Hver dag sker der masser af små uheld på landets arbejdspladser. Vi taler små hændelser, som blot kræver et plaster på såret. Vælg det rette plaster til jeres arbejdsituation. Eller den rigtige kombination. Vi har plastre til almindelige arbejdsituationer, til arbejdspladser med meget fugt og til arbejde i fødevarer-sektoren. Spild ikke tiden på små skader. Træk, sæt på og tilbage til arbejdet. QuickFix løser problemet nemt, hygiejnisk og effektivt.



Træk plasteret ud af dispenserens.
Så er det klart til brug...



...og kan sættes på
med én hånd

VÆLG MELLEM TRE TYPER PLASTRE OG TO LÆNGDER

QUICKFIX ELASTIC

Hudvenligt plaster, der er behageligt at have på. Elastisk, så det følger hudens og håndens bevægelser.

QUICKFIX WATER RESISTANT

Vandfast plaster til arbejdsmiljøer med meget fugt.

QUICKFIX DETECTABLE

Specialplaster til fødevarerindustrien. Den blå farve og den indbyggede metalflade gør det let at spore plasteret både visuelt og via en metaldetektor.

QUICKFIX LONG

Disse plastre er ekstra lange. De kan nå flere gange rundt om fingeren, og sidder dermed endnu bedre fast.



QUICKFIX DETECTABLE

Væghængt plasterdispenser med 90 stk. blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metal-detektor. Især velegnet til fødevarerindustrien. Plastre er produceret i et åndbart materiale.



QUICKFIX ELASTIC LONG

Væghængt plasterdispenser med 60 stk. lange og elastiske tekstilplastre, der tilpasser sig hudens bevægelser. Plastre er meget hudvenlige og lader huden ånde. Det lange plaster kan vikles flere gange om fingeren, og sidder bedre fast.



QUICKFIX DETECTABLE LONG

Væghængt plasterdispenser med 60 stk. lange blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metal-detektor. Især velegnet til fødevarerindustrien. Det lange plaster kan vikles flere gange om fingeren og sidder bedre fast.

Forpakningsstr: 1 stk.
Varenr: 5503
Refill varenr: 5513
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål: l: 72 x b: 25 mm

Forpakningsstr: 1 stk.
Varenr: 5528
Refill varenr: 5508
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål: l: 120 x b: 20 mm

Forpakningsstr: 1 stk.
Varenr: 5529
Refill varenr: 5509
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål: l: 120 x b: 20 mm



QUICKFIX&RINSE

Vægghængt dispenser med 5 stk. øjenskyllampuller med 0,9 % steril natriumklorid og 45 stk. åndbare og elastiske tekstilplastre. Dispenseren giver nem, hurtig og hygiejnisk hjælp til de små uheld med mulighed for at kombinere plaster og øjenskyl efter behov.

Forpakningsstr:	1 stk.
Varenr:	4631
Refill varenr:	5512 & 5160
Dispensermål:	h: 190 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål:	l: 72 x b: 25 mm



Små ampuller til mindre uheld

QuickRinse er en økonomisk løsning til de små uheld



QUICKRINSE

Vægghængt dispenser med 10 stk. øjenskyllampuller med 20 ml 0,9 % steril natriumklorid. Dispenseren giver nem, hurtig og hygiejnisk hjælp til at skylle støv og snavs ud af øjnene. Eller til at få velværet tilbage, når du har tørre eller irriterede øjne. Nem at montere lige dér, hvor der er mest brug for den.

Forpakningsstr:	1 stk.
Varenr:	4632
Refill varenr:	5160
Dispensermål:	h: 135 x b: 230 x d: 32 mm

BRUG QUICKRINSE TIL DE SMÅ SKYL

Øjet er ekstremt følsomt. Derfor kan tørre øjne og små irritationer give store gener med svie, øget lysfølsomhed og smerter. Brug QuickRinse og få velværet tilbage. Hver ampul rummer 20 ml, der løser problemet med tørre eller irriterede øjne. QuickFix&Rinse giver en optimal kombination, hvor du har både plaster og øjenskyllampuller lige ved hånden.

Altid lige ved hånden

Praktiske løsninger - så du kan tage førstehjælpen med dig

Vores plastre og små ampuller med øjenskyll kan du også få i praktiske pakninger, der gør det let for dig at have førstehjælpen med i handskerummet, i værktøjsskassen, i tasken, i en lomme eller i en almindelig førstehjælpskasse. Så er du beredt på de små uheld, som altid indtræffer ubelejlgt, og når du mindst venter det.



QUICKFIX MINI

Lille og praktisk forpakning med 30 stk. elastiske plastre. Nem at have med overalt, hvor du kan få brug for et plaster. Hvert plaster er pakket for sig og er klar til brug blot ved at trække det ud af pakken. Plastrene er hudvenlige og meget behagelige at have på, da de tilpasser sig hudens bevægelser og lader huden ånde.

Forpakningsstr: 30 x 30 stk.
Varenr: 5504
Plastermål: l: 72 x b: 25 mm



QUICKRINSE MINI

Lille og praktisk forpakning med 4 øjenskylleampuller hver med 20 ml 0,9 % steril natriumklorid. En handy løsning, der giver hurtig lindring ved støv og snavs i øjet eller ved irriterede øjne grundet tørre omgivelser. Ampullerne åbnes let og hurtigt med et twist og er klar til brug. Den lille pakkestørrelse gør det let at tage QuickRinse Mini med dig.

Forpakningsstr: 5 x 4 stk.
Varenr: 4619



BÆLTETASKE TIL 200 ML FLASKER

Praktisk taske til at sætte i bæltet, arbejdstøjet eller lignende. Den er let at åbne og giver hurtig førstehjælp, hvis uheldet er ude. En sikker og hygiejnisk måde at opbevare og beskytte flasken på.

Forpakningsstr: 10 stk.
Varenr: 4692

QuickSafe® giver dig hurtig, nem og sikker førstehjælp

Få overblik og sikkerhed for at du altid har det, du har brug for på rette sted.

HER KAN DU FÅ SKRÆDDERSYET ET FØRSTEHJÆLPSSKAB

Sammensæt dit førstehjælpsskab efter behov. Øjensskyl, så du kan skylle fremmedlegemer ud af øjet. pH Neutral til ulykker med syrer eller baser. Plastre, som passer til jeres arbejdsituation. Brandgel, som lindrer mindre forbrændinger. Øjenskylleampuller til små uheld og tørre, irriterede øjne. Servietter, der renser såret. Kompresbind til de mere alvorlige ulykker. Alt sammen under et transparent låg, der giver dig det perfekte overblik over det, du har brug for.

” FÅ DET MEST NØDVENDIGE PÅ RETTE PLADS

Spæncom A/S er en førende leverandør af betonelementer. Her har man valgt Plum Quicksafe® for at øge sikkerheden for de over 500 ansatte. – Vi har valgt Plum Quicksafe®, fordi skabet kan opbygges, så det passer til det enkelte arbejdsområde. På de områder, hvor vi afsyrer betonelementer, kan vi fx placere Plum Øjensskyl og pH Neutral DUO tæt på arbejdsituationen. QuickSafe® indeholder det mest nødvendige, kan placeres, så førstehjælpen er lige ved hånden, og er meget overskuelig med det transparente låg.

Jany Johannsen,
Miljø og sikkerhedskoordinator





QuickSafe® EMPTY

HER ER DET DIG, DER BESTEMMER

Hvis du vil have fuld frihed til at indrette din førstehjælp efter behov, så start med et tomt skab og fyld det, så det passer til din konkrete situation.



KØB ET SKAB OG FYLD DET EFTER BEHOV

Selvfølger kan du få en 100 % skræddersyet løsning, hvis du har behov, vi ikke rammer med de 4 forskellige QuickSafe® løsninger, som vi præsenterer på næste side. Så starter du med en vægstation og fylder det selv med øjenskyllflasker og øvrige førstehjælpsprodukter.

Forpackingsstr:	1 stk.
Varenr:	5173
Mål:	h: 430 x b: 253 x d: 92 mm

Hjælpen sidder lige i skabet

Let adgang til førstehjælp er nøglen til øget sikkerhed

Med QuickSafe® samler du de vigtigste førstehjælpsprodukter ét sted og placerer løsningen præcis der, hvor produkterne skal bruges. Skabet fylder kun lidt mere end et A3-ark. Så du kan placere QuickSafe® lige der, hvor der er brug for det.

Det transparente låg giver dig overblik og gør vejen til førstehjælp hurtig og let. Du kan nemt se, hvornår skabet skal genopfyldes. Med det støvtætte låg og separat indpakkede produkter er QuickSafe® en både hygiejnisk og elegant løsning.



SCAN KODEN ELLER GÅ IND PÅ
PLUM-QUICKSAFE.DK OG SE
HVOR LET DU KAN FÅ EN FØRSTE-
HJÆLPSLØSNING


plum



QuickSafe® BASIC

ET GODT UD GANGSPUNKT

Med et QuickSafe® Basic kan du selv lægge indholdet ind på de øverste hylder. Det giver dig fuld fleksibilitet.

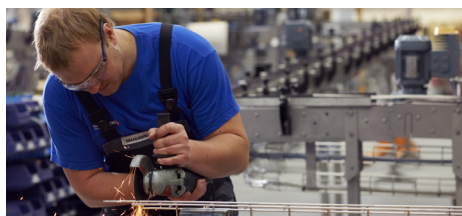

HAR DU SPECIELLE BEHOV TIL DIT FØRSTEHJÆLPSSKAB?

Rygraden i hele QuickSafe®-serien er Plums anerkendte øjenskyll. Med QuickSafe® Basic får du den i kombination med pH Neutral, øjenskylleampuller og plastre. Resten er op til dig. Indret førstesalen i skabet, så den passer med behovene i din virksomhed.

INDHOLD:	Varenr.
2 x 500 ml Plum Øjenskyll	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller	5160
1 x QuickFix Elastic refill med 45 plastre	5512


Forpackningsstr:	1 stk.
Varenr:	5170
Mål:	h: 430 x b: 253 x d: 92 mm



QuickSafe® COMPLETE

DEN KOMPLETTE LØSNING

Øjenskyll inkl. pH Neutral og øjenskylle-ampuller, kompresbind, sårrenseservietter, plastre og brandgel til lindring ved mindre forbrændinger.

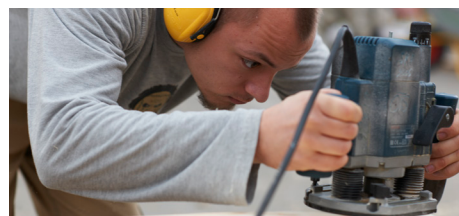

HER FÅR DU EN BRED DÆKNING INDEN FOR FØRSTEHJÆLP

Med QuickSafe® Complete får du et bredt sortiment af førstehjælpsprodukter. Her er midler til de fleste kritiske situationer - og hjælp til mange af hverdagens små uheld.

INDHOLD:	Varenr.
18 x QuickCool brandgel	5150
1 x QuickStop kompresforbinding:	5152
1 stk. 17 x 17 cm og 2 stk. 12 x 7,5 cm	
20 x QuickClean sårrens	5151
2 x 500 ml Plum Øjenskyll	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller	5160
1 x QuickFix Elastic refill med 45 plastre	5512

Forpackningsstr:	1 stk.
Varenr:	5174
Mål:	h: 430 x b: 253 x d: 92 mm



QuickSafe® FOOD INDUSTRY

TIL FØDEVAREINDUSTRIEN

Vi har fyldt en station med relevant indhold, så den passer til de behov, du har i fødevarerindustrien.



HURTIG OG SIKKER HJÆLP MED INDBYGGET SPORBARHED

En førstehjælpsstation målrettet fødevarer-virksomheder, køkkener, kantiner og restauranter – blandt andet med blå sporbare plastre, sårrens, brandgel og kompresforbinding.

INDHOLD:	Varenr.
18 x QuickCool brandgel	5150
1 x QuickStop kompresforbinding:	5152
1 stk. 17 x 17 cm og 2 stk. 12 x 7,5 cm	
20 x QuickClean sårrens	5151
2 x 500 ml Plum Øjenskyll	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x QuickFix Detectable refill med 45 plastre	5513
1 x QuickFix Detectable Long refill med 30 plastre	5509

Forpakningsstr:	1 stk.
Varenr:	5175
Mål:	h: 430 x b: 253 x d: 92 mm



QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

STÆRK LØSNING TIL SKRAPPE MIDLER

Ulykker med syrer/baser kan få alvorlige og livslange følger for den enkelte, hvis du går på kompromis med tilgængeligheden.



NÅR DER ER SEKUNDER MELLEM ET UHELD OG EN ULYKKE

Hvis der er risiko for uheld med syrer eller baser, er sikkerhed i form af effektive og mobile øjenskyllprodukter altafgørende. Indeholder bl.a. pH Neutral DUO, som skyller begge øjne på én gang.

INDHOLD:	Varenr.
1 x 500 ml Plum Øjenskyll DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller	5160
1 x QuickFix Elastic refill med 45 plastre	5512

Forpakningsstr:	1 stk.
Varenr:	5171
Mål:	h: 430 x b: 253 x d: 92 mm



QUICKSTOP

Sårforbindingssæt til effektiv førstehjælp ved både mindre og kraftige blødninger. Steril sårforbinding med integreret kompres. Elastisk, ikke-klæbende og hudvenlig. QuickStop er universelt anvendeligt som tryk-, støtte- og beskyttelsesforbinding.

SÆTTET BESTÅR AF:

1 stk. sårforbinding m/kompres 17 x 17 cm

2 stk. sårforbinding m/kompres 12 x 7,5 cm

Forpakningsstr:

6 x 3 stk.

Varenr:

5152



QUICKCLEAN SÅRRENS

Æske med 40 sårrenseservietter til rengøring af små sår og rifter. Hver serviet er separat indpakket og indeholder sterilt vand. Servietten måler 130 x 200 mm.

Forpakningsstr:

13 x 20 stk.

Varenr:

5551



QUICKCLEAN

Sårrenseservietter til rengøring af små sår og rifter. Hver serviet er separat indpakket og indeholder sterilt vand. Kan anvendes løst og til genopfyldning i QuickSafe-stationerne. 20 stk. pr. æske.

Forpakningsstr:

6 x 20 stk.

Varenr:

5151



QUICKCOOL

Brandgel til førstehjælp ved mindre forbrændinger og skoldninger. Virker kølende og smertelindrende. Indeholder tea tree oil. Kan anvendes løst og til genopfyldning i QuickSafe-stationerne. 18 stk. pr. æske.

Forpakningsstr:

6 x 18 stk.

Varenr:

5150

Oversigt over refills

Hold din førstehjælp opdateret

Du kan let holde dine førstehjælpsskabe og QuickFix-dispensere fyldte og up-to-date. Samtidig kan du supplere din førstehjælp med nye produkter, hvis behovet opstår. Alle stationer har en indbygget fleksibilitet, så du kan sammensætte en løsning, der passer til din virksomhed.



QUICKFIX WATER RESISTANT REFILL

45 stk. vandfaste plastre, der især er velegnede til fugtige arbejdsmiljøer. Plastre er produceret i et beskyttende PE-materiale, der lader huden ånde.


Forpakningsstr: 6 x 45 stk.
Varenr: 5511
Plastermål: l: 72 x b: 25 mm



QUICKFIX ELASTIC REFILL

45 stk. elastiske og behagelige tekstilplastre, der tilpasser sig hudens bevægelser. Plastre er hudvenlige og lader huden ånde.

Forpakningsstr: 6 x 45 stk.
Varenr: 5512
Plastermål: l: 72 x b: 25 mm

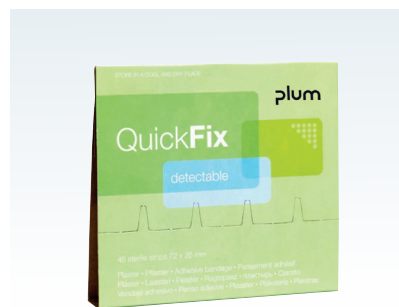

QUICKFIX DETECTABLE REFILL

45 stk. blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevareindustrien. Plastre er produceret i et åndbart materiale.

Forpakningsstr: 6 x 45 stk.
Varenr: 5513
Plastermål: l: 72 x b: 25 mm



QUICKFIX ELASTIC LONG REFILL

30 stk. lange og elastiske tekstilplastre, der tilpasser sig hudens bevægelser. Plastre er hudvenlige og lader huden ånde. Det lange plaster kan vikles flere gange om fingeren, så det sidder bedre fast.

Forpakningsstr: 6 x 30 stk.
Varenr: 5508
Plastermål: l: 120 x b: 20 mm



QUICKFIX DETECTABLE LONG REFILL

30 stk. lange, blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevareindustrien. Det lange plaster kan vikles flere gange om fingeren, så det sidder bedre fast.

Forpakningsstr: 6 x 30 stk.
Varenr: 5509
Plastermål: l: 120 x b: 20 mm



QUICKRINSE REFILL

5 stk. øjenskytleampuller med 20 ml 0,9 % steril natriumklorid. Til genopfyldning af QuickSafe, QuickRinse og QuickFix&Rinse dispenserne.

Forpakningsstr: 4 x 5 stk.
Varenr: 5160

Plum A/S
Frederik Plums Vej 2 · DK-5610 Assens
Telefon +45 6471 2112
info@plum.dk · www.plum.dk

plum